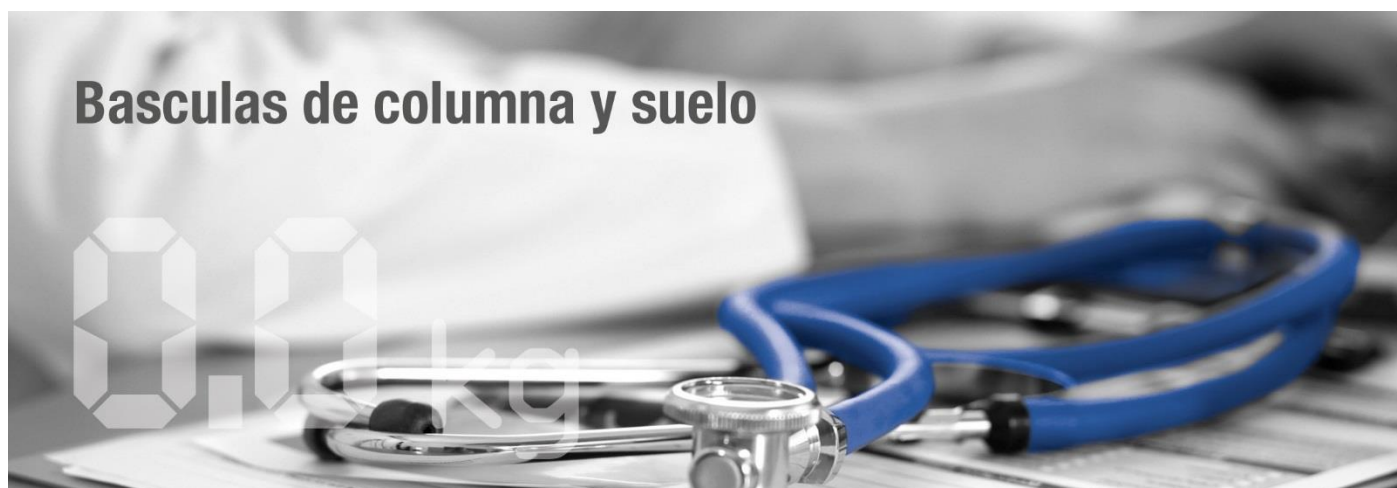




Es la báscula mecánica por excelencia de toda institución médica tradicional y un producto estrella alrededor del mundo sinónimo de precisión, resistencia y calidad. Sus terminados han sido minuciosamente diseñados para ofrecer una versión más completa. Cuenta con dos ruedas de transporte, tallímetro y barra con lectura del lado del paciente y del especialista. Está construida en hierro fundido y acero, resistente a tráfico pesado y equipada con un sistema de palancas en hierro que garantiza una larga vida útil y estabilidad en el uso. Incluye un protector para la superficie de pesaje.

#### Especificaciones Técnico:

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Capacidad:            | 200 kg                       |
| Graduación:           | 100 g                        |
| Dimensiones:          | 280 x 560 x 1470 mm          |
| Peso:                 | 15 kg                        |
| Tamaño:               | 275 x 375 mm                 |
| Rango del tallímetro: | 60 – 210 cm graduación: 1 mm |