

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**

Unser Maßstab ist der Mensch. Von Anfang an!



Geeichte Komfort-Babywaagen

M118000/-01 

Geeichter Wiegekomfort für Frühchen, Babys und Kleinkinder – auch mit Längenmesssystem.

Wir hören und sehen sehr genau hin, wenn es um die Bedürfnisse der kleinsten Patienten und der Anwender unserer Waagen geht. So können wir die Praxiserfahrungen von Ärzten und Pflegepersonal, aber auch von Eltern an unsere Produktdesigner und wiegetechnischen Ingenieure weitergeben.

Das Ergebnis verbindet durchdachte Funktionen mit einer stabilen, sicheren und kindgerechten Bauweise: Präzise, zuverlässige und anwenderfreundliche Säuglings- und Kleinkindwaagen für den Einsatz in Praxen und Entbindungsstationen, Kinderkliniken und Intensivstationen.



M118000



M118000 /-01



Die Waage im Video: Bitte hier klicken!

Im Fokus:

In der Praxis erprobt



**ZERO
TARA**

AUTOMATISCHE NULLSTELLUNG

Ohne weiteres Zutun vom Anwender findet die Waage bei jedem Anschalten selbstständig den Nullpunkt und ist sofort bereit zum Wiegen.

TARA

Praktisch um zusätzliche Gewichte und Gegenstände wie eine Windel oder ein Deckchen automatisch vom Wiegeergebnis abzuziehen.



HOLD

NACHWIEGE-FUNKTION

Zweit- oder Kontrollwiegungen auf Knopfdruck, ohne das Kind von der Waage heben zu müssen.


AUTO-HOLD-FUNKTION

Die Anzeige des Gewichts wird gehalten, während sich der Behandler um das Kind kümmern und anschließend in Ruhe den Wert notieren kann.



BATTERIESTANDSANZEIGE

Die Anzeige des Ladestandes sorgt für rechtzeitigen Batteriewechsel und so für verlässliches Wiegen.

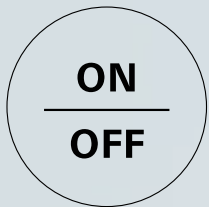

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Mit ihrer Abschaltautomatik spart die Waage Energie für unnötige Standzeiten ganz von selbst.

Der Gesundheit verpflichtet

ADE

Durchdachte Funktionen



ZWEIBEREICHSWAAGE

Bis 20 kg Höchstlast ermitteln diese Modelle präzise Gewichtsangaben – bis 10 kg mit einer extrem feinen Teilung von 5 g, über 10 kg mit einer Teilung von 10 g.

M118000 / -01 



SPARSAM & MOBIL

Die Waagen bieten ihren vollen Funktionsumfang nicht nur im Netzbetrieb, sondern auch im mobilen Batteriebetrieb. Ihre 4 Batterien (AA) versorgen die Waage für 4.000 Wägungen inkl. Ein- und Ausschalten mit Strom.




BENUTZEREINSTELLUNGEN

Umfangreiche Auswahl von individuellen Starteinstellungen wie Abschaltzeiten, Ein- oder Ausschalten von Funktionen (z. B. Auto-Hold).

Die technischen Details

- Höchstlast 20 kg
- Teilung 5 g < 10 kg > 10 g
- Beleuchtetes Display
- Automatische Nullstellung
- Tara-Funktion
- Hold- und Auto-Hold-Funktion
- Batteriestandanzeige
- Automatische Abschaltung
- Batteriebetrieb (4 x AA Batterien inkl.)
- Netzbetrieb (230V) optional

M118000 / -01 



- User-Serviceprogramm
- Internes Justage-Programm zur schnellen Nacheichung

Modell M118000-01

- Integrierte Längenmessung




Das Display

- Hinterleuchtetes LCD-Display zum Ablesen in abgedunkelter Umgebung
- Große kontraststarke Anzeige
- Robuste Folientastatur, Schutzart IP20
- Intuitive Bedienung über Soft-Touch-Tasten



M118000 / -01 

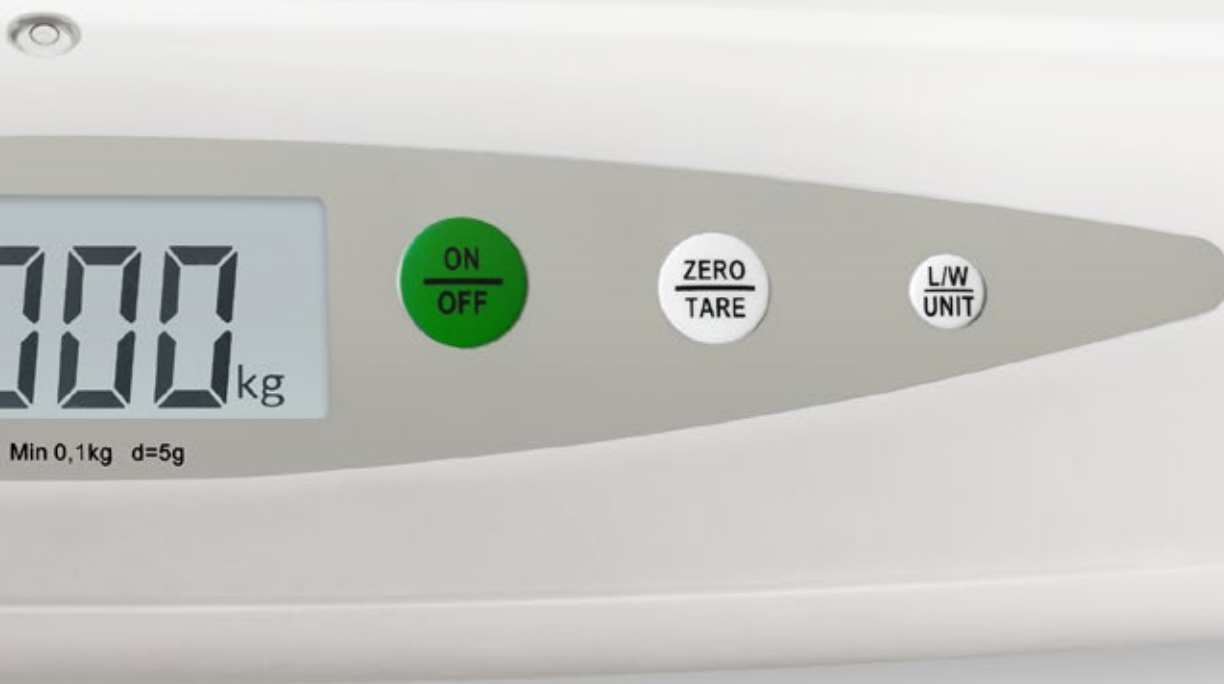

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**

ADE M118000



GROSSZÜGIGE WIEGEFLÄCHE
mit sanft geformter Mulde für
ein geborgenes Gefühl



GERUNDETER KORPUS
ohne spitze Ecken oder
scharfe Kanten




LEICHTES EIGENGEWICHT
von 3,2 kg




Der Gesundheit verpflichtet

ADE

ADE M1 18000 

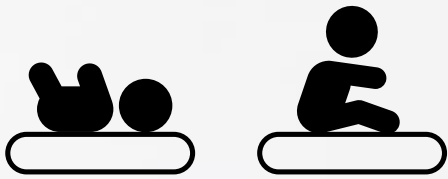

WIEGEN VON BABYS
ODER KLEINKINDERN
im Liegen oder Sitzen

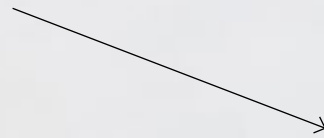

SPALTFREIE WIEGEFLÄCHE
für eine leichte Reinigung

STÖRUNGSFREIES
WIEGEN auch beim
Festhalten am Rand
der Wiegemulde



Der Gesundheit verpflichtet

ADE

ADE M1 18000-01

mit integrierter Längenmessfunktion



ZWEI MESSARME
für eine simultane
Größenanzeige

FREIE POSITION DES KINDES auf der Wiegefläche



Der Gesundheit verpflichtet

ADE

ADE M1 18000-01 

AUTARKE AUSRICHTUNG
beider Messarme



Messbereich von 400 bis 800 mm Länge



EINFACHES UMSCHALTEN
zwischen Wiegeergebnis
und Größenanzeige



Der Gesundheit verpflichtet

ADE

Kleine Menschen. **Große Aufgaben.**

Ihre Bedürfnisse und Sicherheit stehen bei der Behandlung und Pflege von Säuglingen im Vordergrund. Damit sich Babys in ungewohnten Situationen, wie zum Beispiel beim Wiegen und Messen, entspannen können, braucht es eine vertrauensvolle Umgebung.

Darum legen wir bei unseren Waagen Wert auf hochwertige Materialien, eine angenehme Formgebung, Stabilität und ein ebenso schnelles wie einfaches Handling.



Der Gesundheit verpflichtet

ADE



Unser Qualitätsversprechen



Wir bieten unseren Kunden Qualität auf höchstem Niveau. Darum betreibt die ADE Germany GmbH ein integriertes Qualitätsmanagementsystem, welches gemäß folgender Normen durch die TÜV NORD CERT GmbH zertifiziert wurde:

- DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement
- DIN EN ISO 13485

Qualitätsmanagementsystem
für Medizinprodukte



Innerhalb der EU müssen Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt und zur Bestimmung der Masse in Ausübung der Heilkunde den Richtlinien 93/42/EWG über Medizinprodukte und 2014/31/EU betreffend der Bereitstellung nichtselbsttätiger Waagen auf dem Markt entsprechen.

Beratung und Kontakt

+ 49 40 432 776-0

medical@ade-germany.de

ADE Germany GmbH
Neuer Hötigbaum 15
D-22143 Hamburg – Germany
ade-germany.de



Der Gesundheit verpflichtet

ADE