

A photograph of a female doctor with short grey hair and glasses, wearing a white lab coat and a stethoscope, smiling warmly as she examines a baby. The baby is being held by a woman with dark hair, who is also smiling. The scene is brightly lit, suggesting a clinical or hospital setting.

ADE

**BÁSCULAS Y DISPOSITIVOS
DE MEDICIÓN**

Línea Médica

Dedicada a la salud

TABLA DE CONTENIDO

3

ADE – UNA MARCA TRADICIONAL ALEMANA

5

BÁSCULAS DE COLUMNA Y PISO

8

PANEL SOLAR

10

BÁSCULAS PEDIÁTRICAS

14

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE LONGITUD DE BEBÉS

16

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

18

BÁSCULAS DE ÓRGANOS Y PAÑALES

19

ACCESORIOS



UNA MARCA TRADICIONAL ALEMANA CON PRESENCIA MUNDIAL.

Lo que comenzó hace más de 85 años en Hamburgo, en la fábrica de básculas de acero y cortadoras de fiambres, hoy es la reconocida marca ADE Germany GmbH. Un fabricante, socio internacional y proveedor para diferentes industrias, con un amplio portafolio para clientes del sector médico. Nos enorgullece tener presencia en más de 80 países y socios comerciales en los 5 continentes.

Nuestras básculas e instrumentos de medición cuentan con excelente reputación y está garantizado que cumplimos con los más altos estándares de calidad. Nuestros productos se adaptan a las necesidades prácticas del sector y mejoramos continuamente en base a la experiencia de ingenieros, especialistas de producto, profesionales de sector biomédico, nutricionistas, médicos, enfermeras y personal sanitario, organizaciones de ayuda internacional y por su puesto los entes reguladores. Además, reconocemos la importancia y el impacto de nuestros productos y su utilidad en investigación, prevención, diagnóstico médico, también en campañas de nutrición y proyectos de salud pública.

En este catálogo de edición especial presentamos a nuestros clientes una selección dedicada a las necesidades del mercado Colombiano con información detallada de la línea de básculas y dispositivos de medición ADE para uso profesional y médico.


85 años
ADE
PESAJE
CORTE
MEDIDA
1935 | 2020



M32

Básculas médicas aptas para diagnóstico, y tratamiento médico.

Básculas de suelo

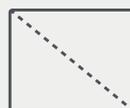

SUPERFICIE DE PESAJE

Segura, cómoda y amplia con recubrimiento antideslizante. Tamaño adecuado para pesar niños y adultos.



MOVILIDAD

Opcional: la maleta de transporte es acolchada y protege la báscula durante las visitas a domicilio o el almacenamiento.



PESO

El peso ligero de menos de 4 kg permite que la báscula sea una solución de pesaje con amplia superficie.



MÁXIMA ESTABILIDAD

Gracias a cuatro patas ajustables y con protección antideslizante.

BÁSCULA ELECTRÓNICA DE SUELO

ADE M320600

Báscula electrónica de suelo para uso hospitalario y clínico con amplia plataforma de pesaje y función de IMC para la evaluación del estado nutricional de los pacientes. La dirección de lectura de la pantalla se puede girar hacia el personal con solo oprimir un botón. La función de tara y hold completan la báscula grado médico. Ofrecemos un adaptador a corriente opcional que se adquiere por separado.

Funciones: conmutador de unidades kg/lbs, ajuste automático de cero, tara, función de retención (hold), función de auto-retención, función de pesaje anterior, función de IMC (índice de masa corporal), función de madre-hijo, pantalla giratoria, indicación de batería baja y apagado automático.



ADE M320600	
Capacidad	250 kg
División	50 g < 50 kg > 100 g
Unidades	kg, lbs
Tamaño de plataforma	380 x 305 mm



Bolsa de transporte ADE MZ10062



IMC (índice de masa morporal), peso y altura



Dirección de lectura en pantalla puede girar con solo un click



Suministro de energía: baterías (4 x AA) y adaptador a corriente eléctrica (opcional)


BÁSCULA ELECTRÓNICA DE COLUMNA

ADE M320600-01

La elección perfecta en todos los campos médicos. Báscula de columna electrónica resistente con una plataforma extra grande, plana y antideslizante. Las ruedas de transporte garantizan una fácil movilidad. Las funciones IMC, retención (hold) y madre-hijo proporcionan resultados rápidos y claros del estado nutricional de los pacientes. La pantalla giratoria permite una fácil lectura desde el lado del paciente y del médico. La construcción de la báscula es a base de 3 piezas principales que se ensamblan rápidamente con la ayuda de un juego de llaves especiales y se incluyen en el envío.

Funciones: conmutador de unidades kg/lbs, ajuste automático de cero, tara, función de retención (hold) función de auto-retención, función de pesaje anterior, función de IMC, función de madre-hijo, pantalla giratoria, indicación de batería baja, apagado automático.

ADE M320600-01	
Capacidad	250 kg
División	50 g < 50 kg > 100 g
Unidades	kg, lbs
Tamaño de plataforma	350 x 450 mm

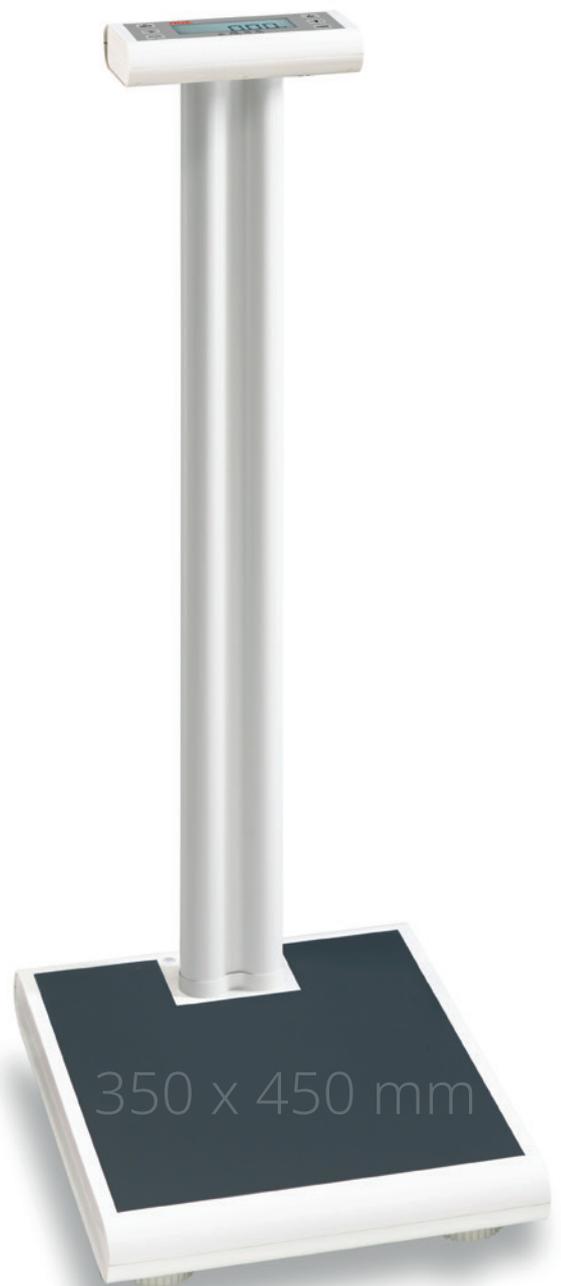

MONTAJE

Montaje rápido con un solo juego de llaves que vienen incluidas. No se requiere de herramientas adicionales.

RUEDAS DE TRANSPORTE

Para facilitar el movimiento del equipo, brindando flexibilidad en el lugar de uso y el almacenamiento.



Suministro de energía: baterías (4 x AA) y adaptador a corriente eléctrica.



El tallimetró se instala fácilmente a la báscula para pesar y medir en un mismo equipo.

TALLÍMETRO MECÁNICO PARA BÁSCULA DE COLUMNA ADE

ADE MZ10023-1

Tallímetro de altura telescópica para la báscula de columna electrónica M320600-01 o para montaje en pared. Cuenta con dos piezas principales deslizantes y un soporte superior para apoyar la cabeza del paciente. Se pueden leer los resultados cómodos y exactos a altura de los ojos. Con la ayuda de este dispositivo se podrán tomar medidas de adultos y niños, ya que tiene un rango de hasta 2100 mm. Es además resistente, de uso intuitivo y sencillo.

ADE MZ10023-1

Rango de medida	600 – 2100 mm
División	1 mm
Unidades	cm



Hasta 250 kilos

600 – 2100 mm

PANEL SOLAR

Una solución eficiente, económica y ambientalmente amigable.

Nuestra experiencia en proyectos de ayuda internacional nos capacita para brindar a nuestros clientes soluciones prácticas y sencillas que faciliten el proceso de pesaje y la medición, así como el trabajo en campo de enfermeras, médicos y personal sanitario. Traemos a nuestro portafolio como novedad, una batería solar recargable y portátil que facilita la operación de nuestras básculas en lugares remotos ó con una infraestructura energética deficiente.



Batería solar recargable

Ofrecemos un panel solar tipo powerbank, como fuente de energía compacta y compatible con nuestras básculas de suelo de la línea M32, con capacidad de hasta 4000 pesajes.

Ver más detalles en la página 18.



BÁSCULA DE SUELO CON FUNCIÓN MADRE-HIJO

ADE M321600


La función de pesaje totalmente automática de madre-hijo permite determinar el peso de los niños recién nacidos y pequeños con rapidez y sin complicaciones en los brazos de una enfermera, padre o trabajador de campo médico, simplemente activando la báscula con la función de toque. Con la ayuda de función de retención automática, el usuario puede leer el peso del niño en la pantalla, después de bajar de la báscula. Incluye una funda de transporte ligera y a prueba de salpicaduras. Cuenta con un interruptor totalmente sellado debajo de la báscula para evitar el consumo de la batería durante el transporte. La plataforma, antideslizante protege del calentamiento a causa de la luz solar mientras permite un pesaje seguro. Batería solar y adaptador no incluidos. Se adquieren por separado.

Funciones: Ajuste automático de cero, tara, función de retención (hold), función de auto-retención, función de IMC, función de madre-hijo, indicación de batería baja, apagado automático, función de encendido al contacto.

ADE M321600-1



Báscula, adaptador a corriente, panel solar y funda de transporte.

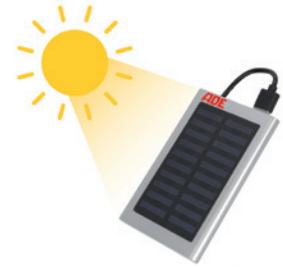

ADE M321600 / M321600-1

Capacidad 250 kg

División 100 g

Unidades kg, lbs

Tamaño de plataforma 380 x 305 mm



FUNCIÓN MADRE-HIJO
Permite pesar a los bebés y niños pequeños en los brazos de sus padres o un cuidador.



Suministro de energía: baterías (4 x AA), adaptador a corriente eléctrica y panel solar.



Los pequeños.

Nuestros productos son homologados y ofrecen comodidad de pesaje para niños prematuros, bebés recién nacidos y niños pequeños. También algunas referencias cuentan con un sistema integrado de medición.

En el foco: Probado en la práctica

ZERO TARA

PUESTA A CERO AUTOMÁTICA

Sin necesidad que el usuario intervenga, la balanza encuentra automáticamente el punto cero cada vez que se enciende y está lista para el pesaje.

TARA

Ésta función permite descontar del proceso de pesaje elementos como mantas, pañales ó blanda.

HOLD

FUNCIÓN DE REPESAJE

Volver a pesar o comprobar un pesaje con solo pulsar un botón, sin necesidad de levantar al bebé de la báscula.

FUNCIÓN DE RETENCIÓN AUTOMÁTICA

El resultado de peso se mantiene en pantalla mientras el profesional atiende al paciente y puede anotar el valor tranquilamente.



INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

El indicador del nivel de carga garantiza la sustitución oportuna de la batería y disponibilidad de la báscula.

ON OFF

APAGADO AUTOMÁTICO

Gracias a su función de desconexión automática, la balanza ahorra por sí sola energía en tiempos de inactividad.

BÁSCULA ELECTRÓNICA PARA BEBÉ

ADE M118600

La bandeja de bebé con contorno suave ofrece gran espacio, además de una superficie segura para los bebés y niños pequeños sentados. La división precisa de 5 g en todo el rango de pesaje de 20 kg, junto con la función de retención automática y un sistema de amortiguación electrónico que garantiza precisos y rápidos resultados de pesaje. La clara pantalla retroiluminada garantiza una fácil lectura también en entornos atenuados. Fácil de utilizar por cuatro botones claramente marcados.

Funciones: conmutador de unidades kg/lbs, ajuste automático de cero, tara, función de retención (hold), indicación de batería baja, apagado automático, pantalla con retroiluminación.

ADE M118600	
Capacidad	20 kg
División	5 g
Unidades	kg, lbs
Tamaño de plataforma	600 x 280 x 90 mm



Bolsa de transporte ADE MZ10060



ESTRUCTURA ERGONÓMICA
sin esquinas ni bordes afilados



PESAJE DE BEBÉS O NIÑOS PEQUEÑOS
acostado o sentado



Suministro de energía: adaptador a corriente eléctrica y baterías (4 x AA)

BÁSCULA ELECTRÓNICA DE BEBÉ CON TALLÍMETRO DIGITAL

ADE M118600-01

El dispositivo de medición de longitud digital, permite medir niños de hasta 80 cm en pasos de 2 mm. El bebé puede ubicarse libremente dentro de la bandeja de pesaje, sin necesidad de manipulación adicional. Los resultados de la medición aparecerán en la pantalla LCD de la báscula de pesaje de bebé.

Todas las funciones y especificaciones de pesaje son equivalentes a ADE M118000.

Funciones: Medición de longitud, conmutador de unidades kg/lbs, ajuste automático de cero, tara, función de retención, indicación de batería baja, apagado automático, pantalla con retroiluminación.



Tallímetro digital para obtener al mismo tiempo la medida del paciente.

ADE M118600-01

Capacidad	20 kg
División	5 g
Unidades	kg, lbs
Tamaño de plataforma	600 x 280 x 90 mm
Rango de medida	400 – 800 mm
División	2 mm
Unidades	mm



Bolsa de transporte ADE MZ10060



Adaptador a corriente ADE H2870-006



Suministro de energía: adaptador a corriente ADE H2870-006 y baterías (4 x AA)



PERSONALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN

El software integrado permite configurar una amplia selección de ajustes individuales, como tiempos de apagado, encendido o desactivación de funciones (por ejemplo, retención automática).

LA PANTALLA

Gran pantalla LCD retroiluminada para leer el resultado aún con poca luz. En el panel central se ubica un robusto teclado de membrana con clase de protección IP20.



Rango de medición de
400 a 800 mm de longitud

PLACA DE MEDICIÓN DE LONGITUD DE BEBÉ

ADE MZ10040

Perfectamente adaptada para el uso móvil y estacionario. Las dos piezas de la placa de medición se instalan rápidamente y se pueden desmontar con la misma rapidez, lo que permite un ahorro de espacio de almacenamiento o transporte. El tope de pie y las placas de medición se acoplan por un solo mecanismo de clip. El soporte central es móvil y se desliza para señalar el tamaño del bebé con 1 mm de exactitud. La superficie es lisa y agradable al contacto con la piel, además es fácil de limpiar.



ADE MZ10040

Rango de medida	100 – 1000 mm
División	1 mm
Unidades	cm



100 – 1000 mm

BOLSA LIGERA

MZ10043

El nuevo diseño mejorado de la maleta de transporte es una opción perfecta, ya que es ligera y resistente. Se utiliza para proteger, guardar y transportar la placa de medición ADE MZ10040 y/o el tallímetro portátil ADE MZ10042. Cuenta con una correa ajustable para cargar hombre y una amplia cremallera que permite el óptimo uso del espacio interno.




Óptima selección
de productos para
médicos, personal de
campo y familias.

TALLÍMETRO PORTÁTIL

ADE MZ10042

El tallímetro ADE MZ10042 es adecuado para los trabajadores de campo médico, como para consultorios y uso hospitalario. La varilla de medición de altura se puede desmontar rápidamente en cuatro piezas que se pueden almacenar dentro de la plataforma base. Cuenta con dos piezas soporte que mantienen el tallímetro estable sin fijación a pared. Se puede leer el resultado con facilidad en ambos lados del indicador color rojo. Se ofrece como accesorio opcional una bolsa de transporte ADE MZ10043.

ADE MZ10042	
Rango de medida	150 – 2100 mm
División	1 mm
Unidades	cm

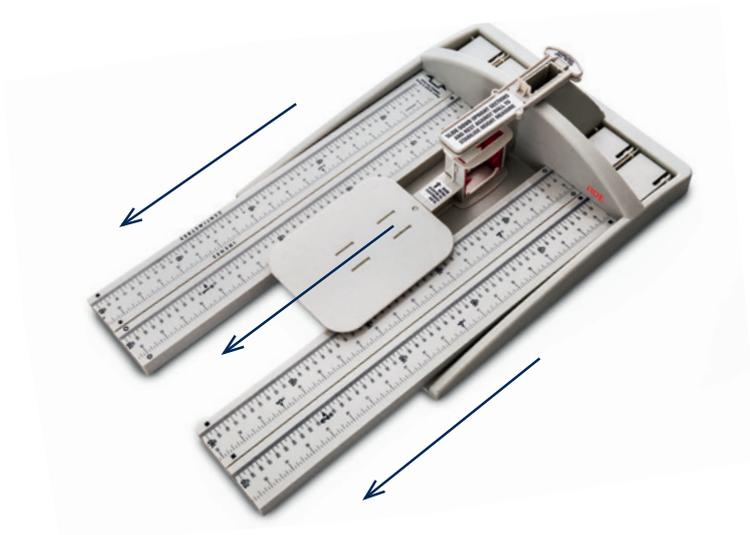

150 – 2100 mm



Bolsa de transporte ADE MZ10043



Indicador de medición

CINTA MECÁNICA DE MEDICIÓN DE ALTURA

ADE MZ10017

Cinta métrica para montaje en pared. Dispositivo de tamaño pequeño, que ahorra espacio para una rápida medición de altura en pacientes de hasta 220 cm. La lectura se realiza a través del indicador en la ventana de visualización ubicado sobre el tope de cabeza.

ADE MZ10017	
Rango de medida	0 – 2200 mm
División	1 mm
Unidades	cm



0 – 2200 mm

CINTA MECÁNICA DE MEDICIÓN DE CIRCUNFERENCIA

ADE MZ10021

Cinta métrica de circunferencia con un diseño clásico para uso médico. El mecanismo de calidad duradera garantiza una lectura exacta y precisa y mantiene la cinta en su posición correcta.

ADE MZ10021	
Rango de medida	50 – 1500 mm
División	1 mm
Unidades	cm



50 – 1500 mm

BÁSCULA DE ÓRGANOS

ADE MP901600

Con una precisión de 1 g, esta báscula es diseñada para las necesidades específicas de los hospitales e instituciones médicas. El recipiente de acero inoxidable completa esta unidad. Funciona con baterías recargables incorporadas para el uso independiente de la red.

Funciones: conmutador de unidades kg/lbs, ajuste automático de cero, tara, función de retención, indicación de batería baja, LCD con retroalimentación.

ADE MP901600	
Capacidad	30 kg
División	1 g
Unidades	kg, lbs
Tamaño de plataforma	535 x 330 x 241 mm



Suministro de energía:
adaptador a corriente y baterías recargables

BÁSCULA DE PAÑALES

ADE PW501

Báscula para pañales con plataforma higiénica de acero inoxidable y laterales ligeramente elevados. Resistente al agua según IP67. La función de tara permite restar el peso de envases pequeños. Funciona con un juego integrado de baterías recargables y red eléctrica.

Funciones: ajuste automático de cero, tara, indicación de batería baja, apagado automático.

ADE PW501	
Capacidad	5 kg
Graduación	1 g
Unidades	kg
Tamaño de plataforma	177 x 140 mm



Suministro de energía:
baterías (4 x AAA) y adaptador a corriente (opcional)



BOLSAS DE TRANSPORTE

ADE MZ10062



Maleta de transporte para básculas electrónicas de piso de la marca ADE.

Cuenta con un compartimento exterior para guardar accesorios y elementos personales. Acolchado y con un separador interior de dos espacios.

Dimensiones: 400 x 315 x 60 mm

Peso: 400 g

Material: Poliéster y Nilón

ADE MZ10060



Una maleta resistente para proteger, guardar y transportar nuestra línea de básculas pediátricas ADE.

Adecuada para las básculas: M1001000-01, M118000, M118600 y M112600

Dimensiones: 600 x 380 x 150 mm

Peso: 600 g

Material: Poliéster y Nilón

ADE MZ10043



Maleta para transportar la placa de medición ADE M10040 y/o el tallímetro portátil ADE MZ10042.

Dimensiones: 600 x 380 x 150 mm

Peso: 600 g

Material: Poliéster y Nilón



PANEL SOLAR

ADE MZ321600-01



Panel Solar tipo Powerbank

Fabricado en aluminio, con protección de seguridad integrada para evitar sobrecarga y cortocircuito. Practico indicador del nivel de carga y botón de encendido. Carga rápida y estable.

Voltaje: 3,7 V

Potencia: 4000 mAh/14,8 Wh

Incluye dos cables de carga. Uno con entrada para USB (1/carga) y el otro para conexión a la báscula (2).

Capacidad para 4000 pesajes. Puede cargarse con luz solar ó via clave USB.



SUMINISTROS DE ENERGÍA

ADE H2870-006



Adaptador a corriente ADE multipaís.

Incluye cabezales intercambiables.

Compatible con las referencias ADE M118600, M118600-01, M112600, M322600, M320600-01, M320600-02, M321600, M322600, M501660, M500660, M403660, M400660, M319660, M319660-01, M319660-02, M118000, M118000-01, M320000, M320000-01 y M320000-02.

Voltaje: 100-240 V AC

Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje de salida: 6 V DC

Corriente de salida: 1.0 A (Max)

ADE

Dedicada a la salud

ADE Germany GmbH
Neuer Höltingbaum 15
22143 Hamburgo, Alemania
Tel +49 40 432776-0
Fax +49 40 432776-10
medical@ade-germany.de



¡HAY UNA SOLUCIÓN PARA CADA PROBLEMA!

Para ADE, la salud humana no es solo una obligación si no es parte fundamental de nuestra misión, por eso buscamos continuamente dar soluciones concretas a través de nuestros productos y servicios. Nuestros clientes pueden tener la confianza que continuamente nuestros departamentos buscan satisfacer nuevas necesidades que surgen en el ámbito médico y están disponibles para aconsejar, prestar servicios posventa y ofrecer a tiempo una respuesta oportuna.

EN ADE LOS PROFESIONALES TRABAJAN PARA PROFESIONALES.



NUESTRO COMPROMISO DE CALIDAD

Ofrecemos a nuestros clientes el más alto nivel de calidad. Para ello, ADE Germany GmbH pone en práctica un sistema de gestión de calidad integrado, que ha sido certificado por TÜV NORD CERT GmbH, conforme a las siguientes normas:

DIN EN ISO 9001, Gestión de calidad

DIN EN ISO 13485, Sistemas de gestión de calidad para productos sanitarios