



ADE
MEDICAL

**Medimos con amor
cuidamos con pasión**

Línea Médica

Básculas y
dispositivos
de medición



UNA MARCA DE TRADICIÓN ALEMANA CON PRESENCIA MUNDIAL

Lo que comenzó hace más de 90 años en Hamburgo como una fábrica de básculas de acero y loncheadoras es hoy ADE Germany GmbH, una marca reconocida en todo el mundo. Nos hemos consolidado como fabricante, socio internacional y proveedor fiable para diversos sectores, con una gama especializada para el ámbito sanitario. Actualmente estamos presentes en más de 80 países y contamos con socios comerciales en los cinco continentes.

Las básculas y los instrumentos de medición ADE son reconocidos por su precisión, su durabilidad y el cumplimiento de los más exigentes estándares internacionales de calidad. Nuestros productos están diseñados para responder a las necesidades reales del sector sanitario y se perfeccionan continuamente gracias a la experiencia y las aportaciones de ingenieros, especialistas de producto, profesionales biomédicos, nutricionistas, médicos, personal de enfermería, organismos reguladores y organizaciones de ayuda internacional.

Somos conscientes de la importancia de nuestros equipos en ámbitos clave como las consultas externas, la prevención, el diagnóstico médico, las campañas de nutrición, los proyectos de salud pública y la investigación. Por eso, cada dispositivo ADE está pensado para ofrecer mediciones precisas y el cuidado de las personas.

En esta edición especial del catálogo presentamos una selección exclusiva pensada para las necesidades del mercado español, con información detallada sobre nuestra gama de básculas y dispositivos de medición para uso profesional y médico.

III BÁSCULA ELECTRÓNICA DE COLUMNA

M320000-01

La elección perfecta para cualquier especialidad médica. Báscula electrónica de columna robusta, con plataforma extragrande, plana y antideslizante. Las ruedas de transporte facilitan su desplazamiento. Las funciones IMC, retención (hold) y madre-hijo agilizan el trabajo y facilitan la valoración del estado nutricional de los pacientes. La pantalla giratoria se lee cómodamente tanto desde el lado del paciente como desde el del médico. La báscula se compone de 3 piezas principales que se montan rápidamente con el juego de llaves especiales incluido.

Funciones

- Puesta a cero automática
- Tara
- Retención de peso (hold)
- Auto-retención (auto-hold)
- Pesaje anterior
- IMC (índice de masa corporal)
- Función madre - hijo
- Visualización giratoria
- Indicación de batería baja
- Apagado automático
- 6.000 pesajes con un solo juego de baterías AA

Capacidad	250 kg
División	100 g
Unidades	kg
Tamaño de plataforma	350 x 450 mm

MONTAJE

Montaje rápido con el juego de llaves incluido. No se necesitan herramientas

RUEDAS DE TRANSPORTE

Permiten desplazar la báscula con facilidad y aportan flexibilidad en el lugar de uso y a la hora de guardarla.


Highlights



Capacidad
250 kg



Tamaño de plataforma
350 x 450 mm

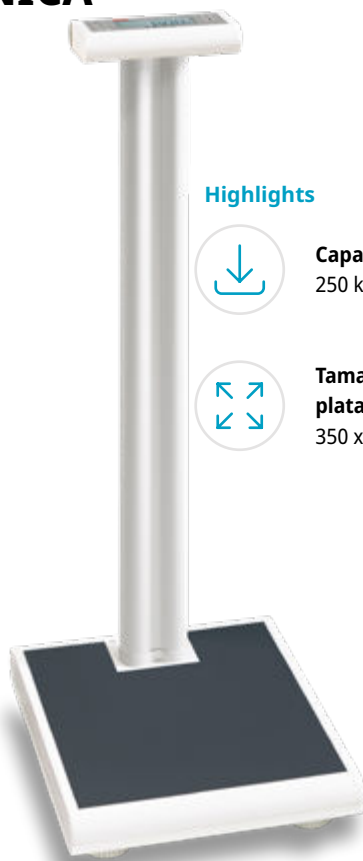

Alimentación: pilas (4 x AA) y adaptador de corriente

TALLÍMETRO MECÁNICO PARA BÁSCULA DE COLUMNA ADE

MZ10023-1




Tallímetro telescópico para la báscula de columna electrónica M320000-01 o para montaje en pared. Cuenta con dos secciones deslizantes y un tope superior que se apoya sobre la cabeza del paciente, lo que permite mediciones cómodas y precisas a la altura de los ojos. Su diseño permite medir tanto a adultos como a niños, con un rango de medición de hasta 2100 mm.

Fabricado con materiales resistentes, es intuitivo y fácil de usar: ideal para entornos clínicos.

El tallímetro se instala fácilmente a la báscula para pesar y medir en un mismo equipo.

Rango de medida	600 – 2100 mm
División	1 mm
Unidades	cm

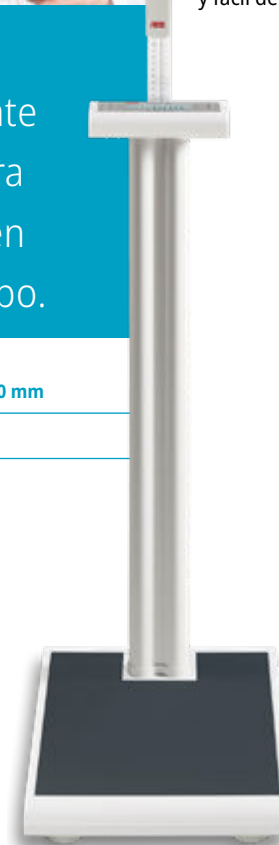

Hasta 250 kilos

600 – 2100 mm

Los más pequeños

Nuestras básculas pediátricas homologadas, de clase de precisión III, ofrecen un pesaje cómodo para bebés prematuros, recién nacidos y niños pequeños. Algunos modelos incluyen, además, un sistema de medición integrado.



PUESTA A CERO AUTOMÁTICA

Al encenderse, la báscula detecta automáticamente el punto cero sin intervención del usuario y queda lista para pesar al instante.

TARA

Esta función permite descontar del pesaje elementos como mantas o pañales.



INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

El indicador del nivel de carga garantiza la sustitución oportuna de la batería y disponibilidad de la báscula.



FUNCIÓN DE REPESAJE

Permite volver a pesar o comprobar un pesaje con solo pulsar un botón, sin tener que retirar al bebé de la báscula.



FUNCIÓN DE RETENCIÓN AUTOMÁTICA

El resultado de peso se mantiene en pantalla mientras el profesional atiende al paciente y puede anotar el valor tranquilamente.

APAGADO AUTOMÁTICO

Gracias a la desconexión automática, la báscula ahorra energía cuando no se utiliza.

III BÁSCULA PESABEBÉS ELECTRÓNICA M118000

Combina precisión y comodidad, con una bandeja contorneada que brinda un espacio seguro para recién nacidos y niños pequeños. Su tecnología avanzada garantiza resultados rápidos y exactos, ideal para hospitales y consultas de pediatría. Incorpora pantalla LCD retroiluminada, sistema de amortiguación electrónica, patas niveladoras con burbuja de nivel, teclado de membrana, funciones de tara y auto cero, indicador de batería baja, y función de ingesta de leche (MIF).



Funciones

- Puesta a cero automática
- Tara
- Retención de peso (hold)
- Indicación de batería baja
- Apagado automático
- Función MIF (ingesta de leche materna)
- Pantalla retroiluminada

Highlights



Capacidad
20 kg



Tamaño de plataforma
600 x 280 mm

Capacidad	20 kg
División	5 g
Unidades	kg
Tamaño de bandeja	600 x 280 x 90 mm




Bolsa de transporte ADE MZ10060
Adaptador a corriente ADE H2870-006



ESTRUCTURA ERGONÓMICA
sin esquinas ni bordes afilados



PESAJE DE BEBÉS O NIÑOS PEQUEÑOS
tumbados o sentados

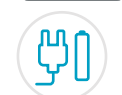

Alimentación: pilas (4 x AA) y adaptador de corriente.

III BÁSCULA PESABEBÉS ELECTRÓNICA CON TALLÍMETRO DIGITAL

M118000-01

El tallímetro digital integrado permite medir niños de hasta 80 cm en pasos de 1 mm. El bebé puede ubicarse libremente dentro de la bandeja de pesaje, sin necesidad de manipulación adicional. Los resultados de la medición aparecerán en la pantalla LCD de la báscula de pesaje de bebé. Todas las funciones y especificaciones de pesaje son equivalentes a ADE M118000.

Funciones

- Puesta a cero automática
- Ajuste automático de cero
- Tara
- Retención de peso (hold)
- Indicación de batería baja
- Apagado automático
- Función MIF (ingesta de leche materna)
- Pantalla retroiluminada



Capacidad	20 kg
División	5 g
Unidades	kg
Tamaño de plataforma	600 x 280 x 90 mm
División	1 mm
Unidades	cm, inch
Rango de medida	400 – 800 mm



Bolsa de transporte ADE MZ10060

Adaptador a corriente ADE H2870-006



Alimentación: pilas (4 × AA) y adaptador de corriente ADE H2870-006 opcional.

Tallímetro digital para obtener el peso y la longitud de paciente a la vez.



Personalización y configuración

El software integrado permite personalizar numerosos ajustes, como los tiempos de encendido y apagado o la activación y desactivación de funciones concretas (por ejemplo, la retención automática).



La pantalla


Gran pantalla LCD retroiluminada para leer el resultado aún con poca luz. En el panel central se ubica un robusto teclado de membrana con clase de protección IP20.

INFANTÓMETRO PEDIÁTRICO

MZ10040

Diseñado para uso móvil y estacionario, con montaje rápido y almacenamiento eficiente. El infantómetro consta de dos piezas que se ensamblan y desmontan fácilmente, lo que facilita su transporte y ahorra espacio. El tope para los pies y las placas se conectan mediante un práctico mecanismo de clip. El tope es deslizante y permite medir con precisión la estatura del bebé, con una división de 1 mm. La superficie es lisa, agradable al tacto y fácil de limpiar.

Rango de medida	0 – 1000 mm
División	1 mm
Unidades	cm

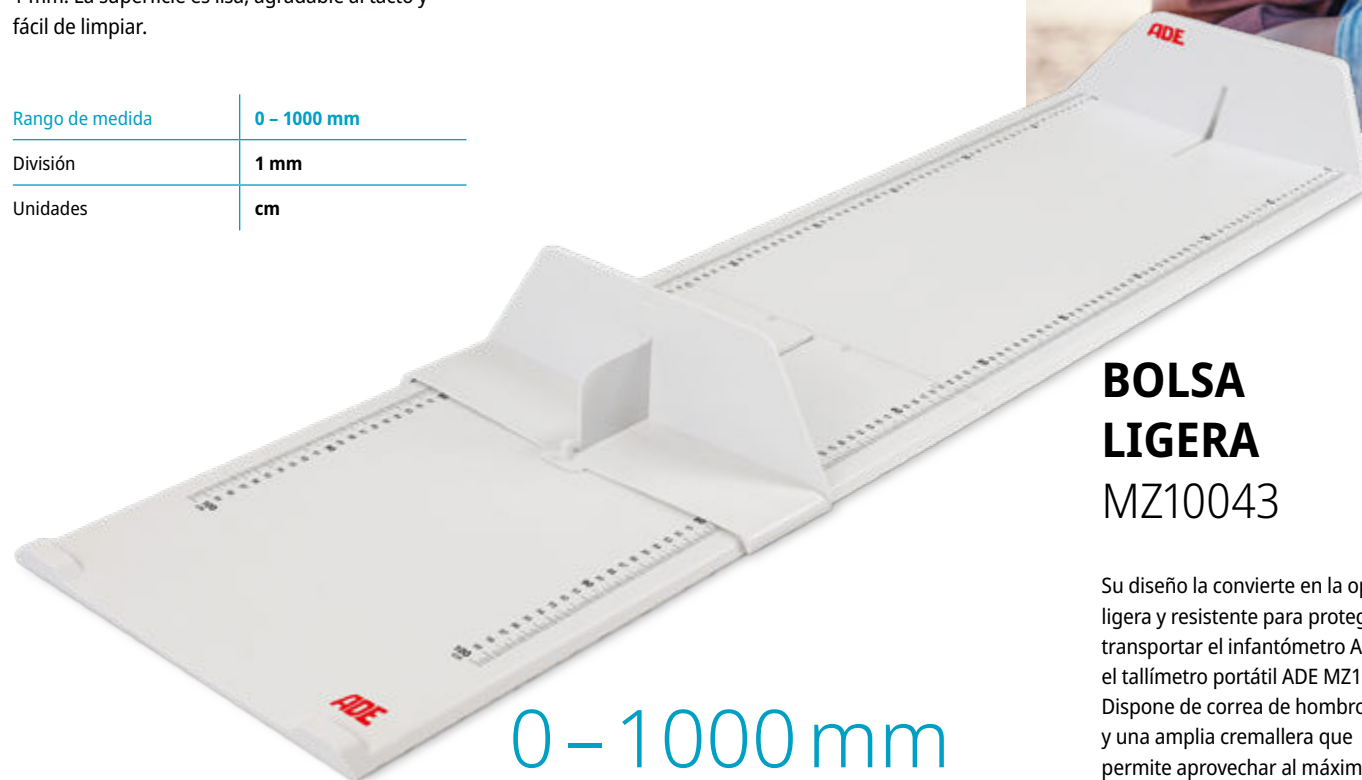

0 – 1000 mm

Óptima selección
de productos para
médicos, personal de
campo y familias.



BOLSA LIGERA

MZ10043

Su diseño la convierte en la opción perfecta: ligera y resistente para proteger, guardar y transportar el infantómetro ADE MZ10040, el tallímetro portátil ADE MZ10042 o ambos. Dispone de correa de hombro ajustable y una amplia cremallera que permite aprovechar al máximo el espacio interior.



ESTADIÓMETRO PORTÁTIL

MZ10042

Diseñado para uso móvil, ideal para trabajadores de campo, pediatras y uso clínico. La barra telescópica se desmonta en cuatro partes y se guarda fácilmente dentro de la base para un transporte cómodo y seguro. Equipado con dos separadores de pared para garantizar estabilidad vertical durante la medición, no requiere herramientas ni montaje permanente. La escala de doble cara y el punto indicador rojo garantizan lecturas rápidas y precisas desde ambos lados. Ligero y compacto, es una solución perfecta para profesionales en movimiento.

Aspectos destacados

Portátil y fácil de montar

Medición estable sin necesidad de fijación en pared

Alta precisión con división de 1 mm

Datos técnicos

Rango de medición	15 – 210 cm
División de escala	1 mm
Unidades	cm
Dimensiones	420 x 345 x 2150 mm
Peso	2,3 kg



Separadores de pared para estabilidad vertical



Indicador rojo y nivel de burbuja para lecturas precisas



Ligero y compacto para trabajo de campo móvil

III BÁSCULA ELECTRÓNICA DE SILLA M403020

Con cuatro ruedas giratorias, dos de ellas con freno, se desliza sin esfuerzo a cualquier rincón. Reposapiés abatibles para sentarse y levantarse

sin dificultad. Reposabrazos acolchados y asiento ergonómico.

Aspectos destacados

Armazón metálico estable

Con cuatro ruedas giratorias

Funciones

- Puesta a cero automática
- Tara
- Pre-tara
- IMC
- Retención de peso (hold)
- Indicación de batería baja
- Apagado automático
- Interfaz RS232
- Pantalla retroiluminada

Datos técnicos

Capacidad	250 kg
División	100 g
Unidades	kg
Altura del asiento	490 mm
Dimensiones del asiento	380 x 450 mm
Dimensiones totales	600 x 850 x 960 mm
Peso	28 kg



4 ruedas direccionables –
2 ruedas bloqueables



Alimentación: adaptador de corriente y baterías recargables (incluidos)

III BÁSCULA ELECTRÓNICA PARA SILLA DE RUEDAS M501020

Pesaje seguro y eficiente, con rampas integradas en ambos lados para acceder fácilmente con silla de ruedas. Estructura de acero macizo hasta 300

kg, división de 100 g. Pantalla LCD retroiluminada y funciones de tara, pretara, hold e IMC. Para hospitales, residencias y centros de rehabilitación.

Aspectos destacados

Rampas integradas en ambos lados

Con asas y ruedas para transporte

Alta capacidad y precisión

Funciones

- Puesta a cero automática
- Tara
- Pre-tara
- IMC
- Retención de peso (hold)
- Indicación de batería baja
- Apagado automático
- Interfaz RS232
- Pantalla retroiluminada

Datos técnicos

Capacidad	300 kg
División	100 g
Unidades	kg
Dimensiones de la plataforma de pesaje	800 x 800 mm
Dimensiones totales	1070 x 1050 x 70 mm
Peso	45 kg



Alimentación: adaptador a corriente y batería recargable (incluidos)



¡HAY UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD!

Para ADE, la salud de las personas no es solo una obligación, sino una parte fundamental de nuestra misión. Por eso buscamos continuamente soluciones concretas a través de nuestros productos y servicios. Nuestros clientes pueden confiar en que nuestros departamentos trabajan constantemente para responder a las nuevas necesidades del ámbito médico y están a su disposición para asesorar, prestar servicio posventa y dar una respuesta rápida.

**EN ADE LOS PROFESIONALES
TRABAJAN PARA PROFESIONALES.**



NUESTRO COMPROMISO DE CALIDAD

Ofrecemos a nuestros clientes el más alto nivel de calidad. Para ello, ADE Germany GmbH pone en práctica un sistema de gestión de calidad integrado, que ha sido certificado por TÜV NORD CERT GmbH, conforme a las siguientes normas:

**DIN EN ISO 9001,
Gestión de calidad
DIN EN ISO 13485,**

**Sistemas de gestión de calidad
para productos sanitarios**

ADE Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 15
22143 Hamburgo
Alemania

Tel +49 40 432776-0
Fax +49 40 432776-10
medical@ade-germany.de

